

# ЕНА POST & ЕНА СЕМ



УНИКАЛЬНАЯ  
АДГЕЗИЯ

ЕНА  сеп<sup>HF</sup>

ПРЕКРАСНАЯ БИОСОВМЕСТИМОСТЬ



ЕНА POST • ЕНА СЕМ

ЕНА POST • ЕНА СЕМ<sup>HF</sup>

## СНИМКИ ПОД МИКРОСКОПОМ



Увеличение показывает однородность ENA CEM<sup>HF</sup> в отличии от других дуальных цементов, в которых есть воздушные пузырьки.

## ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОМБИРОВКА КАНАЛА

## ENA CEM<sup>HF</sup>

дуальный цемент на основе композита

- коронки и мосты
- штифты
- композитные и керамические виниры, инлеи и онлеи

Продукт	ENA CEM <sup>HF</sup>	Флоу цемент двойного отверждения	Композит высокой вязкости
Плотность (сила 35 N)	45	28/55	> 500
Прочность по Викерсу МПа	670	270	600/700
Модуль Юнга МПа	12850	5471	8000/11000
Прочность на изгиб МПа	116	88	140
Прочность при сжатии МПа	342	216	400
Рентгеноконтрастность	210% AI	30% AI	

- Высокая наполненность (77% веса)
- Физические характеристики от ENAMEL plus HRi
- Без воздушных пузырьков
- Минимальная плотность < 50мг
- Флуоресцентен и рентгеноконтрастен



Адгезивная система ENA ETCH-ENA BOND с катализатором



**УНИКАЛЬНАЯ  
АДГЕЗИЯ**



Фиксация **ENA POST** и надстройка культи зуба с помощью цемента **ENA CEM<sup>HF</sup>**  
Случай от д-ра Лоренцо Ванини



Эстетические прямые реставрации сделаны с **ENA POST** и **Enamel Plus HRi**

## ENA POST стекловолоконные штифты

- Эстетика: флюоресценция и цвет дентина
- Функциональность: имеет эластичность дентина
- Прекрасная интеграция с зубом, цементом и композитом
- Уникальный штифт, волокна которого состоят из композита
- Превосходная силанизация волокон в штифте
- Различим только на рентгене
- Цветовые кольца для лёгкой идентификации

## ПРЕКРАСНОЕ ЗАКРЫТИЕ КАНАЛА

### КОНУСНОСТЬ 2%




Цветовое кольцо Вы можете использовать для определения глубины канала...

### КОНУСНОСТЬ 10%



... зафиксировав его на уровне, где следует обрезать штифт перед фиксацией в канале.


## ИЗУЧЕНИЕ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ

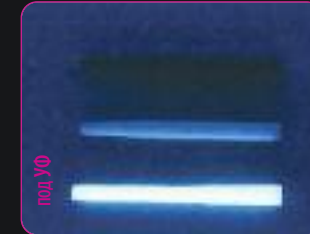

Карбоновый стандартный штифт и **ENA POST** стекловолоконный штифт



**ENA POST** в разрезе под увеличением (от проф. V.Kaitsas)

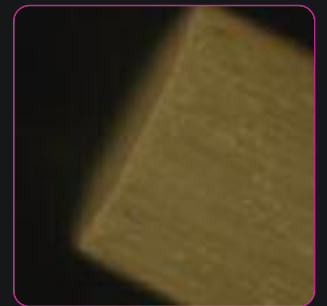

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ



## ENA POST



## ENA CEM



СО СТЕКЛОВОЛОКОННЫМ ШТИФТОМ И  
КОМПОЗИТОМ

CP1000

### НАБОР ЭСТЕТИЧЕСКИХ ШТИФТОВ

ENA POST КОН.10%	
ЭнаПост фибер штифт в 0,5-1,6 мм	5 шт
ЭнаПост фибер штифт в 0,7-1,8 мм	5 шт
ЭнаПост фибер штифт в 0,9-2,0 мм	5 шт
ЭнаПост фибер штифт в 1,1-2,2 мм	5 шт
Дриль ENA POST по 1 разным размерам	4 шт

CP0200

### НАБОР ЭСТЕТИЧЕСКИХ ШТИФТОВ

ENA POST КОН.2%	
ЭнаПост фибер штифт в 0,8-1,25 мм	5 шт
ЭнаПост фибер штифт в 1-1,45 мм	5 шт
ЭнаПост фибер штифт в 1,2-1,65 мм	5 шт
ЭнаПост фибер штифт в 1,4-1,88 мм	5 шт
Дриль ENA POST по 1 разным размерам	4 шт

CRCK

### НАБОР - ЦЕМЕНТ ДВОЙНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

ENA CEM™ цвета UD1-UD2-UD3-UD4	4x3 г
Бонд	2 мл
Катализатор бонда	2 мл
Гель протравочный 37%	2 мл
Аксессуары	

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

CRCPD1	ENA CEM UD1	8г
CRCPD2	ENA CEM UD2	8г
CRCPD3	ENA CEM UD3	8г
CRCPD4	ENA CEM UD4	8г
CRCPD5	ENA CEM UD5	8г
COSM300A	Бонд	5 мл
COSM300D	Катализатор бонда	5 мл
COSM101	Гель протравочный 37%	2x 2мл
CRCTIPB	Канюли коричневые смешивающие с иглой	50 шт
CRCTIPN	Канюли коричневые смешивающие	50 шт
CRCTIPL	Канюли белые интраоральные	25 шт
COSM3A	Канюли оранжевые с металлическим носиком	50 шт



Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi, 83  
16036 Avegno (GE) Italy  
Tel. (+39) 0185 7887 880  
Fax (+39) 0185 7887 970  
hfo@micerium.it • www.micerium.com

