

**ENAMEL PLUS HRI®**  
**BIO FUNCTION**

*Biocompatible*



# BIO-KOMPATIBILNÝ KOMPOZIT S UNIKÁTNymi VLASTNOSŤAMI

# DO FRONTÁLNEHO AJ POSTRANNÉHO ÚSEKU

- > **Vysoko bio-kompatibilný materiál** neobsahuje Co-monoméry ani Bis-GMA, neobsahuje voľné nanočastice
- > **Podobný oder (abrázia)** ako má prirodzená sklovina
- > **Mechanické a funkčné vlastnosti** podobné zlatu
- > **Ideálna leštiteľnosť a manipulácia**
- > **Vhodné pre priamu aj nepriamu techniku ošetrenia**
- > **Vysoká rádiopacita** (250% v porovnaní s hliníkom)
- > Obsahuje **fluorid**

FLUORESCENCIA  
AKO PRI PRIRODZENOM ZUBE



Prirodzený zub


ZUB s výplňou skloviny  
a dentínu Bio Function





## BIO-KOMPATIBILNÝ

Inovatívne materiály UDMA a TCDDMDMA majú nulovú cytotoxicitu a neobsahujú organickú zlúčeninu Bis-GMA, ktorá v ľudskom tele vykazuje estrogénne charakteristiky, čo môže viesť k zdravotným problémom. Obsahuje agregované nanočastice, ktoré nemôžu preniknúť cez bunkovú membránu, na rozdiel od voľných nanočastíc, ktorých účinok na zdravie je stále predmetom výskumu.

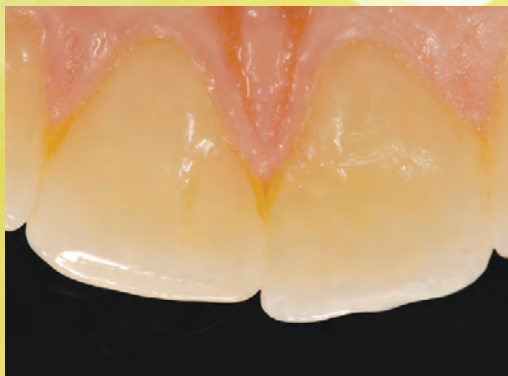

## FUNKČNÝ

Jediná kompozitná sklovina s mechanickými a funkčnými vlastnosťami ako má zlato typu III a prirodzená sklovina, ktorá si zachováva okluzálnu stabilitu v čase, vyhovuje nárokom neuromuskulárneho systému a z estetického hľadiska sa výborne integruje. Odtiene kompozitu vystavené nízkej úrovni oderu sú podobné prirodzenej sklovine.





ENAMEL<sup>plus</sup> HRI<sup>®</sup>  
BIO FUNCTION

## VYNIKAJÚCA MANIPULÁCIA

Nová konzistencia materiálu umožňuje ideálnu manipuláciu a zaručuje optimálne tvarovanie aj pri rôznych izbových teplotách. Kompozit sa nelepi na prístroj, ľahko sa s ním manipuluje a udržiava si daný tvar.

## IDEÁLNA LEŠTITEĽNOSŤ

Materiál s vysoko jemným agregovaným sklom z kremičitanu bárnateho ( $0,3 \mu$ ) umožňuje vynikajúcu leštiteľnosť a dlhodobé zachovanie vysokého lesku.

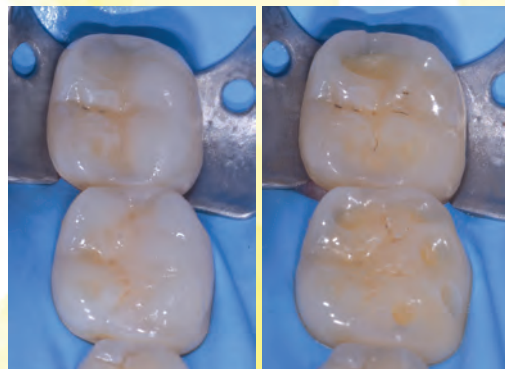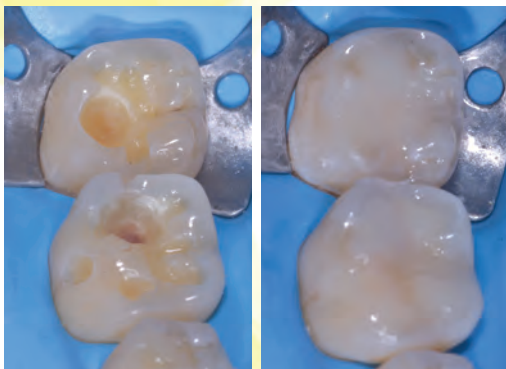





# ENAMEL<sup>plus</sup> HRI<sup>®</sup> BIO FUNCTION



SKLOVINA

## ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION SKLOVINA

CHRBFB1	BF1 Enamel (nízky jas)	5 g
CHRBFB2	BF2 Enamel (stredný jas)	5 g
CHRBFB3	BF3 Enamel (vysoký jas)	5 g



DENTÍN

## ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION DENTÍN

CHRBDO	Dentín BD0	5 g
CHRBDO,5	Dentín BD0,5	5 g
CHRBBD1	Dentín BD1 (A1)	5 g
CHRBBD2	Dentín BD2 (A2)	5 g
CHRBBD3	Dentín BD3 (A3)	5 g
CHRBBD3,5	Dentín BD3,5 (A3,5)	5 g
CHRBBD4	Dentín BD4 (A4)	5 g
CHRBBD5	Dentín BD5	5 g
CHRBBD6	Dentín BD6	5 g



CR3FB

## ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION KIT 2,5 g

Obsahuje 3 skloviny Bio Function: BF1, BF2, BF3



CHR3BFD

## ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION MINI KIT 3 FARBY 2,5 g

2 Bio Function Dentín: BD2, BD3

1 Bio Function Sklovina: BF2



CHR12

## ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION DENTINE & ENAMEL KIT 5 g

3 Bio Function Sklovina: BF1, BF2, BF3

9 Bio Function Dentín: BD0, BD0,5, BD1(A1), BD2(A2), BD3(A3), BD3,5 (A3,5), BD4(A4), BD5, BD6

 **Dentonet**

Distribútor pre Slovenskú republiku:

**DENTONET s.r.o.** Pažica 32, 080 06 Prešov

www.dentonetsro.sk

Zastúpenie pre **BA** kraj:

Ing. Štefan Migala, +421 904 618 390 • migala@dentonet.sk

Zastúpenie pre **PO a KE** kraj:

Marek Onderišin, +421 903 618 390 • onderisin@dentonet.sk

Zastúpenie pre **TT a NR** kraj: Branislav Kujan, +421 901 771 721, kujan@dentonet.sk

Designer & Distributeur :

Micerium S.p.A.

Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy

Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970

hfo@micerium.it • www.micerium.com

File: Enamel plus HRI BioFunction SK13\_04-2018

  
**GRUPPO  
MICERIUM**